

ドイツ製 フリッチュ社  
メッサーミル P-11




ZERKLEINERN

**FRITSCH**

PARTIKELMESSEN TEILEN MILLING PARTICLE SIZING DIVING ZERKLEINERN PARTIKELMESSEN TEILEN MILLING PARTICLE SIZING DIVING



P-11 WEBサイト

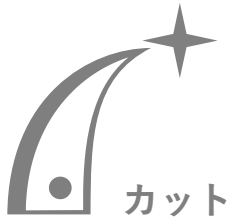

**ミキサー方式**

鋭利なカッターで切断  
カッターは4種類

MAX  
**14000**  
rpm

**超高速回転**

最大6秒間の  
ターボ機能搭載



**冷凍粉碎**

熱に弱い試料に対応  
液体窒素が使用可能





●カバーOPEN時



●容器取り外し時

## アクセサリ



### カッター

- ステンレス製 標準刃
- ステンレス製 鎌型刃
- ステンレス製のこぎり刃
- チタンコーティング製のこぎり刃



### 容器

- ポリカーボネート製
- ステンレス316L製
- コポリエステル製



### フタ

- シリコン製 (標準)
- バリオリッドシステム (押し込み棒付き・PP製)
- 冷凍粉碎用 (ステンレス容器専用)



### 使い捨て容器

- PP製 40mL
- PP製 100mL
- 専用アダプター

## 特長


最大1250Wの超強力モーターによって、およそ数十秒で試料を粉末状へ粉碎します。



ステンレス製容器と液体窒素を使用することで、熱に弱い試料も効果的に粉碎できます。



バリオリッドシステムを使用することで、容器容量を0.54Lまで減らし、少量で粉碎が難しいケースでも効率よく粉碎できます。

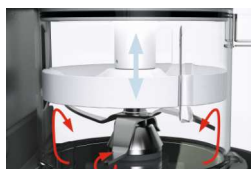

## 仕様

試料サイズ	最大 40 mm
処理量	最大1300mL
使用分野	食品や飼料、バイオ、繊維、医薬品等
電源	単相 100~120V, 1250W 単相 200~240V, 1000W
重量	17.6kg
寸法	W32 x D43 x H48 cm

## お問い合わせ

### フリッチュ・ジャパン株式会社



横浜本社 横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル6階  
 TEL: 045-641-8550 / FAX: 045-641-8364  
 大阪営業所 大阪市淀川区西中島7-2-7 大西ビル6階  
 TEL: 06-6390-0520 / FAX: 06-6390-0521  
 福岡営業所 福岡市西区福重5-4-2 アザリアS姪浜403  
 TEL/FAX: 092-707-6131  
 MAIL: info@fritsch.co.jp / URL: <http://www.fritsch.co.jp>

※商品改良や仕様変更に伴い、やむを得ずに商品の一部形状や色を予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

★保守・修理対応は最寄りの営業所までお問い合わせください。